

EPA認定
第四級
アンモニウム塩
含浸

環境除菌用ウエットクロス

ハクゾウ
環境クロス® Wブロック ラインナップ

品番	写真	種類・規格	包装	製品サイズ (mm)		1梱入数	ケースサイズ (mm)		JANコード
				製品重量 (g)	ケース重量 (kg)				
2600170		150×300mm	30枚/個	220×80×35	240	36個/ケース	360×260×240	9.0	4 958286 064154
2600173		150×300mm	60枚/個	220×80×80	440	18個/ケース	360×260×240	8.5	4 958286 064161
3940000		100枚入 専用ボトル	1個	直径106×172	85	60個/ケース	566×540×466	5.2	4 958286 715513
3940002		詰替用 130×180mm	100枚/個	100×75×200	323	24個/ケース	445×340×185	8.5	4 958286 711775
2600174		大判容器入 150×300mm	250枚/個	210×210×205	2,435	4個/ケース	475×470×215	10.7	4 958286 061795
2600175		大判詰替用 150×300mm	250枚/個	180×130×180	2,040	6個/ケース	397×376×200	12.8	4 958286 061801

ハクゾウ環境クロスWブロック 60枚入 専用ホルダー

品番	写真	規格	包装	JANコード
3905050		本体 (リシールフック用)	1個/袋	4 958286 710242
3905051		ネジ式	1個/袋	4 958286 709604
3905052		フック式	1個/袋	4 958286 709611
3905053		フック式 (部分白コート)	1個/袋	4 958286 709628

※詳細は各営業にお問い合わせください。

ハクゾウメディカル株式会社
〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 神戸営業所 ☎078-940-8975
東京支店 ☎03-3522-6720 広島営業所 ☎082-849-4188
北大阪支店 ☎072-653-4045 福岡営業所 ☎092-481-5921
南大阪支店 ☎0721-20-2900 熊本営業所 ☎096-345-2253
仙台営業所 ☎022-393-7434 札幌駐在所 ☎011-788-8009
関東営業所 ☎03-5809-4780 盛岡駐在所 ☎019-613-2176
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
三河営業所 ☎0564-54-5447 松山駐在所 ☎089-994-8649
三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
京都営業所 ☎075-603-4826 山陰駐在所 ☎0859-30-2193
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
阪神営業所 ☎078-262-1634 沖縄駐在所 ☎098-941-5320

Design Your Voice
HAKUZO Hakuzo

環境除菌用ウエットクロス

EPA認定
第四級
アンモニウム塩
含浸

ハクゾウ
環境クロス® Wブロック

米国環境保護庁 (EPA) 認定第四級アンモニウム塩
含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。

環境の洗浄・除菌に



ハクゾウメディカル株式会社

環境表面の清掃

日常的に埃や汚れを取り除く

ノンクリティカル
(Spauldingによる分類)

広範囲の清掃に
アルコールを使用しない

Spauldingの分類 医療現場で使用される器材は、用途リスクにより分類されています。 **環境表面はノンクリティカル**

リスク分類	用途	例	処理方法
クリティカル	無菌の組織や血管に挿入するもの	手術用器具、循環器または尿路カテーテル、移植埋め込み器具、針など	滅菌 高水準消毒薬で長時間処理
セミクリティカル	粘膜または健常でない皮膚に接触するもの	呼吸器系療法の器具や麻酔器具、軟性内視鏡、咽頭鏡	高水準消毒
		体温計、薬杯など	中または低水準消毒
ノンクリティカル	・健常な皮膚とは接触するが、粘膜とは接触しないもの ・ 環境表面	ベットパン、血圧計のマンシェット、松葉杖、ベッド柵、リネン、ベッド、食器、テーブルの表面、聴診器、膿盆など	低水準消毒 洗浄 清拭

ノンクリティカル器具、環境表面の清掃は日常的に埃や汚れを取り除く必要はありますが、厳重な消毒を行う必要はありません。血液・体液・排泄物などに汚染された場合、低～中水準消毒薬を用いて清掃します。

製品特長① 洗浄・除菌効果

米国環境保護庁(EPA)の認定を受けた液剤が幅広い菌や汚染物の除去、除菌に効果を発揮します。(すべての菌を除去または除菌するわけではありません。)

- サイズ：130mm×180mm(100枚入)、150mm×300mm(30枚、60枚、250枚)
- 素材：レーヨン不織布
- 成分：第四級アンモニウム塩、水(pH:約7.7)

※水洗トイレに流さないでください。

EPA認定
第四級
アンモニウム塩
含浸



製品特長② 幅広い環境表面の洗浄に

中性の液剤となっており、金属やプラスチックへの影響が少なく、また、においもほとんどありません。また、アルコールと比べ揮発性が低いので1枚でも広範囲に清掃することができます。

使用用途

- テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌
- 汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌



《適応素材》

- 【金属】ステンレス、アルミ
 - 【プラスチック】ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリエチレングレフタレート、塩化ビニル、アクリル、ABS
 - 【その他】ゴム、ウレタン、シリコン
- ※合成皮革を含むすべての革製品にはご使用いただけません。

製品特長③ 60枚入専用ホルダー

60枚入は専用ホルダーがあり、使用環境に応じて使い分けすることができます。




※リールフックは、専用ホルダーに付属されておりません。

製品特長④ 吊り下げて使用可能

30枚入のフックには穴が空いており、S字フックを使用して、ラックなどにぶら下げてご使用頂くこともできます。



弊社製品「ラック楽ホルダーNET」でご活用頂くことができます。

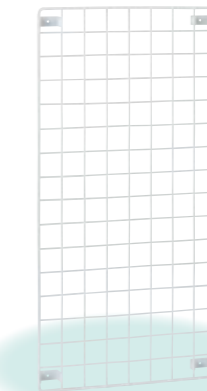

使用上の注意点

- 水洗トイレには流さないでください。●開封後は取り出し口を閉め、なるべく早めにご使用ください。●目や粘膜に直接使用しないでください。●人体の清拭には使用しないでください。●体に異常が現れた時は、使用を中止してください。●合成皮革を含むすべての革製品にはご使用しないでください。●機械類などに使用する際は、その取扱説明書などで清掃方法をご確認の上ご使用ください。不明な場合は、機器メーカーへお問い合わせください。●手荒れ防止のため、グローブを着用してからご使用ください。
- 250枚入容器に詰め替える際または1ヶ月に1回程度、容器の内側とフタの下部を洗浄し、容器とフタを乾燥させてください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。●高温・多湿の場所及び直射日光を避け、清潔な場所に保管してください。