



# ハクゾウ テープ止めタイプ

横モレ防止

簡単テープ式パンツタイプ

男女兼用

## 何度でもつけはずし簡単 しっかり止まる!

あふれモレを防止

消臭ポリマー配合  
臭いにも安心



流れ・伝いモレを防止

- マット中央部を低くした尿パッド用ポケットが、尿パッドのズレから生じるモレを防止します。同時にポケットの効果で股間部のゴワつきを解消しています。
- お尻をしっかり包み込む形状に改良し、ぴったりフィットしてモレを防ぎます。
- 立体ギャザーの位置を左右に広げ、尿モレをシャットアウトします。
- 全吸収量 S:約800mL、M:約1100mL、L:約1400mL




品番	種類	適合ヒップサイズ	包装	1梱入数
3180333	S34P	57～92cm	34枚/袋	3袋
3180334	M30P	77～110cm	30枚/袋	3袋
3180335	L26P	92～130cm	26枚/袋	2袋



# ハクゾウ シートタイプ

- フィッシュボーンマットですばやい吸収。
- 高吸収ポリマーで吸収力アップ。
- 経済的で安心のニュータイプ。

- 高吸収ポリマーの使用に加え、フィッシュボーン形エンボスとダイヤ形エンボスの二重効果で水分をすばやく吸収・拡散、表面はサラッとしています。
- 全吸収量 約670mL

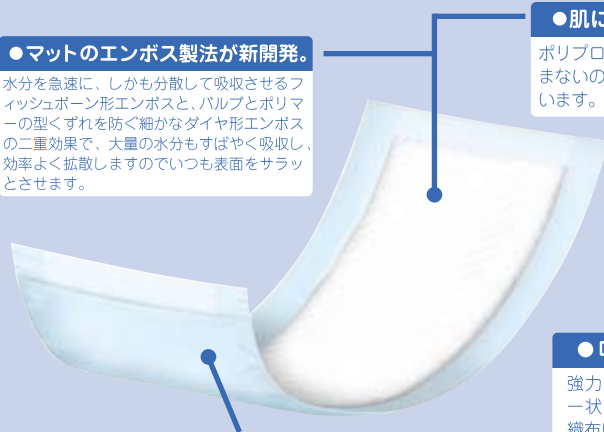

● マットのエンボス製法が新開発。

水分を急速に、しかも分散して吸収させるフィッシュボーン形エンボスと、パルプとポリマーの型くずれを防ぐ細かなダイヤ形エンボスの二重効果で、大量の水分もすばやく吸収し、効率よく拡散しますのでいつも表面をサラッとさせます。

● 肌にあたる不織布が新開発。

ポリプロピレン製の不織布は水分をふくまないで、感触はいつもサラッとしています。

● 吸収ポリマーが新開発。

強力な高吸収ポリマーが水分をゼリー状にかため、肌にあたる表面の不織布はいつもサラッとしています。

● バックシートが新開発。

外側の防水シートは、ソフトでしなやかなので気になる音も少なく、装着感にすぐれたシートです。



品番	種類	規格	包装	1梱入数
3180301	30P	30cm×72cm	30枚/袋	8袋



## ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 神戸営業所 ☎078-940-8975  
 東京支店 ☎03-3522-6720 広島営業所 ☎082-849-4188  
 北大阪支店 ☎072-653-4045 四国営業所 ☎0875-52-6900  
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 北九州営業所 ☎093-617-3911  
 仙台営業所 ☎022-393-7434 福岡営業所 ☎092-481-5921  
 西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253  
 三河営業所 ☎0564-54-5447 札幌駐在所 ☎011-788-8009  
 三重営業所 ☎059-350-3844 盛岡駐在所 ☎019-613-2176  
 京都営業所 ☎075-603-4826 北陸駐在所 ☎076-225-8013  
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 山陰駐在所 ☎0859-30-2193  
 阪神営業所 ☎078-262-1634 沖縄駐在所 ☎098-941-5320