滅菌済

Hakuzo

スマートフォン用保護袋

スーパークリーンバッグ

SAKURA

高い透明性と優れた操作性を兼ね備えた、滅菌済みスマートフォン保護袋。


使用場所 | 手術室、無菌処置室など



特許取得済(特許第7500113号)
実用新案登録済(実登3257318号)
考案者:日本医科大学　消化器外科　櫻澤 信行 先生

製品サイズ

約 22.5cm×13cm

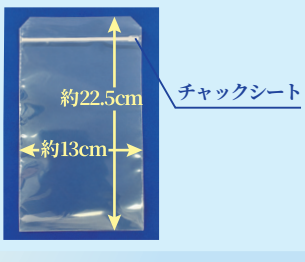

スマートフォン用保護袋

スーパークリーンバッグ SAKURA

5つのこだわり



01 無菌性

当製品は滅菌済です。独自の台形フラップ構造により、スマートフォン挿入が開口部を折り返すことでスムーズに行え、挿入後は折り返しを元に戻すことで、袋の外側を清潔に保てます。また、使用後は開口部を広げてV字構造に変換することで、側面シールを簡単に裂いて大きく開口でき、スマートフォンを血液などで汚染することなくスムーズに取り出せます。

02 高透明性

高い透明性により、4Kでの術中撮影でも鮮明な映像を維持。画質への影響を抑えます。

03 優れた操作性

手袋の素材に左右されずタッチ操作が可能。医療現場でのスムーズな操作をサポートします。

04 静音設計

袋特有のガサガサ音を最小限に抑え、手術室などでも気になりにくくしました。

05 幅広い用途

清潔操作が求められる場面だけでなく、スマートフォンを汚れから保護したい場面にも対応。幅広い医療シーンで活用できます。

使用手順

シンプルな手順で操作することができます。

折り返しておくことで、スマートフォン挿入時に投入口に触れても、折り返しを戻せば外側の清潔を保てます。



清潔野の作業者が開口部を折り返します。




不潔野の作業者がスマートフォンを保護袋に挿入します。




清潔野の作業者が、保護袋越しにスマートフォンを操作します。

※本製品は外から高い圧がかかったり、水没したりする状況での完全なる密封性は確保されていません。そのため、心臓血管外科、整形外科、脳神経外科等でクリーンルームにて手術を施行したり、また他にも高度な清潔環境下の手術や手技を施行する場合には本製品の使用をお控えください。

使用後は…

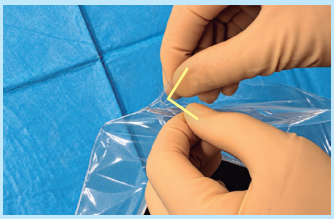

袋上部のV字状の切れ込み(黄色線の箇所)から左右に力を加えてください。

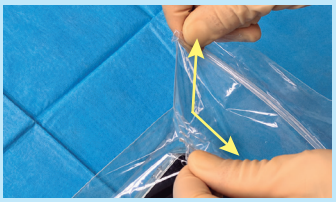

側面のシールを裂いて(黄色矢印の方向に)開封してください。

品　番	規　格	包　装	1梱入数	JANコード
1490547	1個滅菌 20袋入	20袋/箱	12箱/ケース	4 958286 084541

ハクゾウメディカル株式会社
〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 https://www.hakuzo.co.jp/

ｺﾝｼｭｰﾏｰ課 ☎06-6809-4318
東京支店 ☎03-3522-6720
北大阪支店 ☎072-653-4045
南大阪支店 ☎0721-20-2900
仙台営業所 ☎022-393-7434
関東営業所 ☎03-5809-4780
西東京営業所 ☎042-646-0451
名古屋支店 ☎052-769-6021
静岡営業所 ☎0548-23-4170
三重営業所 ☎059-350-3844
京都営業所 ☎075-603-4826
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118
阪神営業所 ☎078-262-1634
神戸営業所 ☎078-940-8975
広島営業所 ☎082-849-4188
福岡営業所 ☎092-481-5921
熊本営業所 ☎096-345-2253
札幌駐在所 ☎011-788-8009
沖縄駐在所 ☎098-941-5320