



Design Your Voice

Hakuzo

MEDICAL PRODUCT INFORMATION

手術用製品のご案内

ハクゾウメディカル株式会社

当社の手術用製品は、手術や処置など医療のさまざまなシーンで多目的に使われている製品です。

そのシーンひとつひとつに合う製品を提供するため、多彩なラインナップに加え、個別のニーズにきめ細かくお応えします。それぞれの医療現場に最適な製品をお奨めし、業務に専念できる環境づくりをお手伝いします。



また当社では、体内遺残防止への取り組みを行っています。医療現場のリスクマネジメントに対応した製品開発や販売に力を入れ、医療事故防止への取り組みに努めています。

目次

▶▶▶ テクノス福島工場・熊本工場のご紹介 P.3 ~ P.4

東日本エリアの拠点・福島工場	3
西日本エリアの拠点・熊本工場	3
滅菌ガーゼの製造工程（熊本工場）	4
EOG 滅菌の安全性について	4

▶▶▶ 滅菌ガーゼのメリット P.5

滅菌製品はコスト高になっていると思いませんか？	5
滅菌器の稼働を減らして節電対策を！！	5

▶▶▶ 手術用関連製品のご紹介 P.6 ~ P.21

当社の X 線造影糸製品について	6	ハクゾウ滅菌メジャーゼ	14
ハクゾウ滅菌オペガーゼ G	7	ハクゾウラパットクリア G (ヒモ付)	14
ハクゾウオペガーゼ G	7	TM ガーゼ	15
ハクゾウオペガーゼ G (W)	7	ハクゾウラパット G (ヒモ付)	15
ハクゾウ滅菌オペガーゼ NEO クロス	8	エレファスポンジ (ヒモ付)	15
ハクゾウオペガーゼ NEO クロス	8	ハクゾウ合わせガーゼ (ヒモ付)	15
ハクゾウ滅菌ラパロガーゼ G	9	滅菌プレット G	16
ハクゾウラパロガーゼ G	9	ガーゼボール GX	16
ハクゾウ滅菌ラパロガーゼ NEO	9	ツッペル G	16
ハクゾウラパロガーゼ NEO	9	ディオシート X	16
滅菌プレカウントガーゼ	10	ディオシート XJ	17
カウントラック	10	ディオシート	17
ハクゾウガーゼカウントトレ	11	ハクゾウアイスティック	18
ハクゾウ滅菌ハーフガーゼ G	11	ハクゾウアイスポンジ	18
ハクゾウハーフガーゼ G	11	Dr.HUBY ポートクリーナー 医療用綿棒	19
ハクゾウオペガーゼ G クォーター	12	サージポケット	19
ハクゾウ滅菌エレファァーゼ H	12	SS ボックス	20
エレファァーゼ H	12	ラパロパーム	20
エレファァーゼ H ハーフ	12	エレファドレープ	21
ハクゾウ滅菌エレファァーゼ H ハーフ	13	滅菌ストッキネット・アール	21
クォーターガーゼ S	13	ウエットプレット No.40	21
タンポンガーゼ	13	滅菌シンプルタイ	21
ニュートンポンガーゼ	13	滅菌フランチタイ	21
		滅菌ハードタイ	21

▶▶▶ その他、手術用関連製品のご紹介 P.22 ~ P.23

ネオフラックス S ハイソックスタイプ	22	メディカルディスポシーツ	22
ハクゾウ爽やか清潔タオル	22	災害用関連製品のご紹介(創傷処置用製品)	23
ハクゾウすっきりタオル	22	災害用関連製品のご紹介(衛生材料)	23
ハクゾウうるおいケアタオル	22		

東日本エリアの拠点・福島工場

福島県相馬市にある福島工場は、アルコール棟・管理滅菌棟の2棟で構成。アルコール綿やキット製品などを生産しており、最近では手指消毒剤の生産も行っています。また太陽光発電システムを導入するなど環境に対する取り組みを行っており、環境にやさしい工場を目指しています。



20kwの太陽光発電パネル



処置キット
(衛生材料組み合わせセット)



アイスティック
(眼科用吸水スティック)



Dr.HUBY ポートクリーナー医療用綿棒
(カメラポート清掃用綿棒)



ハクソウ滅菌プレカウントガーゼ

西日本エリアの拠点・熊本工場

熊本県菊池市にある熊本工場は、原料資材倉庫棟・エレゼ棟・エレファーゼ棟・ステライル棟・アルコール棟・事務所棟の6棟で構成。手術用・処置用の医療ガーゼやX線造影材入りガーゼなどのガーゼ製品、プッシュ綿棒シリーズ、エレファワイパーシリーズや環境除菌用ウエットクロスなどを製造しています。



滅菌エレファーゼ



プッシュ綿棒シリーズ
(薬液付き綿棒)



エレファワイパーシリーズ
(単包装アルコール綿)



環境除菌用ウエットクロス

タイムリーに、現場の声に応じて

ガーゼのサイズや折り方、包装に至るまで、きめ細やかに管理し、原料の入荷から加工、保管に至るまで一貫して生産を行っています。

滅菌ガーゼの製造工程 (熊本工場)

最新技術と万全の管理体制で高品質と安心・安全・安定を保証します。

医療現場で使用される製品だからこそ、製品から包装に至るまで、ご施設の意見・ニーズに細かくお応えしています。また、滅菌ガーゼなどの滅菌製品の品質管理を徹底し、厳しい試験をクリアした製品のみが形となり、ご施設にお届けされていきます。滅菌管理体制は、ISO基準を中心にを行い、地球環境にやさしい商品づくりを目指しています。

1 原料・資材入荷



ロット毎に原料資材の入荷を記録し、区分された倉庫に原料資材を保管しています。

2 原料・資材移動



原料資材を移動し、エアージャクターから搬入します。また運送時には付着した埃などを除く為エアージャワーを通し作業室へ搬入します。

3 裁断加工・折加工




温湿度管理された領域で裁断加工、折加工を行います。裁断時に発生する埃は、吸引により室外に放出させます。

4 検品工程



CCDカメラにより異物や汚れのチェックをします。X線造影材入りガーゼについては重量選別器で枚数チェックを行います。また作業者の目視検品により小さな異物や汚れの除去も行っています。

5 半製品移動

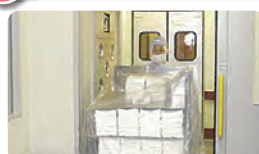

裁断加工、折加工したガーゼを包装工程のクリーンルームに移動します。

6 包装工程




クリーンルームにおいて滅菌バッグにガーゼを充填します。ガーゼの形状、使用用途に合わせて最適な包装形態を選びます。

7 検品・梱包工程



目視により最終検品を行い、小箱・ダンボールに梱包します。

8 滅菌工程

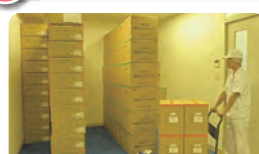

包装工程から滅菌工程へ滅菌前の製品を移動します。滅菌室前で滅菌の順番を待ちます。

9 滅菌



厳しい滅菌工程管理を実施。滅菌システムを熟知したスタッフが滅菌を行い管理しています。

10 保管



滅菌後の製品にも配慮し、十分な換気能力、温度管理された滅菌倉庫にて保管しています。滅菌倉庫は、常にフィルターを通った空気を循環しています。

11 出荷




滅菌製品の搬出時はエアージャクターを通り、滅菌倉庫内への埃などの侵入を防ぎ、製品検査に適合した製品のみが、美原物流センターへ出荷されます。

EOG 滅菌の安全性について

EOG滅菌済のガーゼは本当に安全なの？

EOG滅菌は、低温滅菌法であり金属への腐食性がなく、材料への影響も少ないというメリットがありますが、素材への残留性を気にされているご施設もあるのではないのでしょうか。一般的に使われている高圧蒸気滅菌は安全性も高く環境への残留性も少ない優れた滅菌法ですが、ガーゼ・脱脂綿などのセルロース素材では若干酸化してしまい変色してしまうことがあります。当社の滅菌ガーゼはEOG滅菌を行っていますが、滅菌処理後は十分な換気能力と温度管理された滅菌倉庫で一定期間保管しており、残留濃度が基準値以下になっているのを確認した上で製品の出荷を行っていますので、安心してご使用して頂けます。

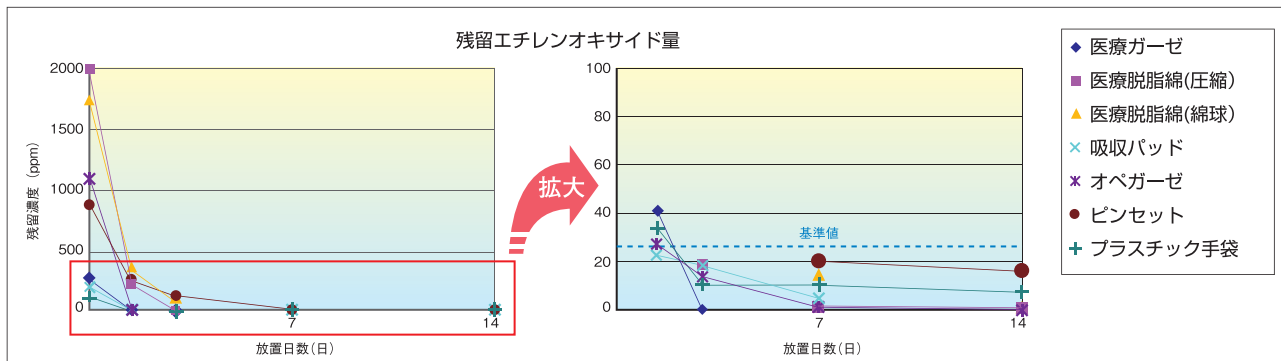

【当社熊本工場での試験結果】

※ガーゼ、脱脂綿など各素材でのEOG滅菌後の残留ガス濃度測定結果です。滅菌物によって若干の差が出ていますが、保管期間の14日後では全ての滅菌物において残留濃度が基準値以下になっているのが確認できます。




滅菌後の保管条件、滅菌品の材質及び形状により、滅菌直後は高濃度な残留のものもありますが、十分な換気能力、温度管理された滅菌倉庫で保管しています。

滅菌ガーゼのメリット

滅菌製品はコスト高になるとは思っていませんか？


中央材料室でカスト缶を使用して、滅菌ガーゼを作成する場合、カスト缶の洗浄・乾燥・包装・滅菌の管理といった作業工程があり、材料費に加え、目に見えない費用もかかっています。(1 参照)
一方で、既存品の滅菌ガーゼを購入された場合は、購入費自体は高めになりますが、洗浄・包装・滅菌作業といった業務を省力化することができ、滅菌の維持が確実である為、安全性の高い製品となっています。(2 参照)

1. カスト缶を使用して滅菌ガーゼを作成する場合

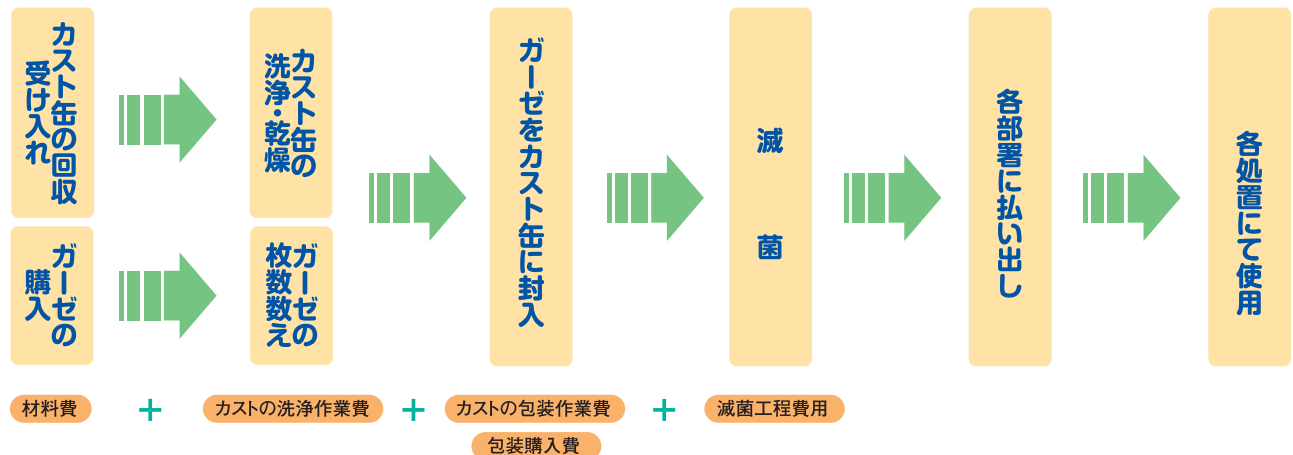

カスト缶を使用して滅菌ガーゼを作成する場合は、カスト缶の洗浄・乾燥、包装作業、滅菌などの作業がかかり、それぞれの工程での費用もかかってしまいます。

2. 既存品の滅菌ガーゼを購入して使用する場合

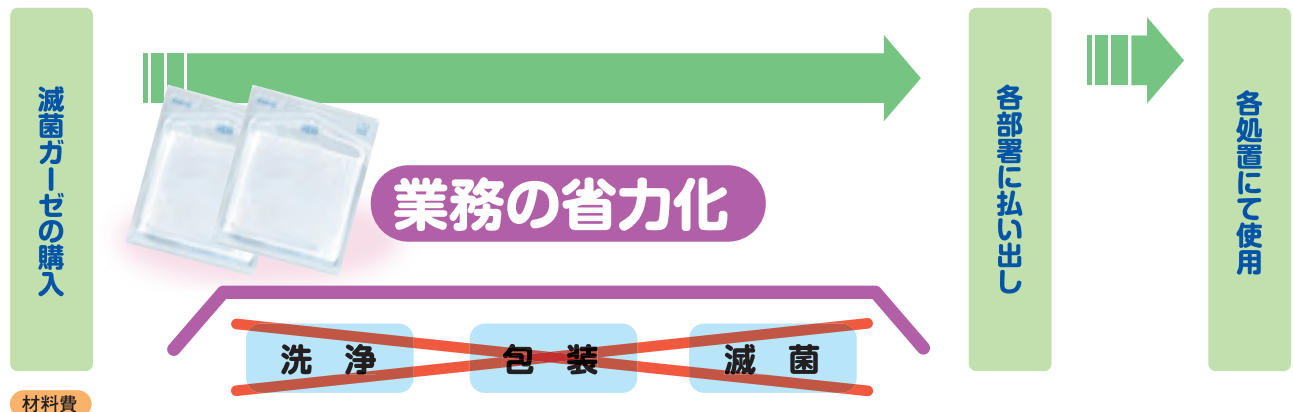

既存品の滅菌ガーゼを購入した場合は、洗浄・包装・滅菌・管理等の業務の省力化を図ることができ、落下細菌による汚染の心配もなく安全性も高く感染防止対策にもつながります。
また、特定のご施設向けに別注対応も可能ですので、ご施設で独自に作成していたものを当社で製造することができ、今まで以上に業務の省力化が図れるかと思われます。

既存品の滅菌ガーゼは業務の省力化と安全性を兼ね備えた製品です。

安全性

+

業務の省力化

滅菌器の稼働を減らして節電対策を！

東日本大震災をきっかけに、全国的に電力不足となり、医療機関でも節電対策が必要不可欠な状態となっています。院内で消費されるエネルギーの約75%は空調や照明と言われており*、設定温度の見直しや不要時消灯の徹底、事務職員のクールビズの導入がされているご施設もございます。(※資源エネルギー庁推計 調べ)

また、滅菌ガーゼを導入することで、院内で使われている高圧蒸気滅菌器やEOG滅菌に使用される電気量の節約にもなり、コストメリットや業務の省力化だけでなく院内の節電対策にもつながると考えられます。

手術用関連製品のご紹介

当社のX線造影糸入り製品

タイプ	Gタイプ			NEOタイプ	
種類	G	G(W)	Gクリア	NEO	NEOクロス
糸種類	単糸	2本糸	リボン状	撚糸	撚糸(2本×2本)
太さ	0.65mm	1.3mm	6mm	1mm	1mm
写真					
造影材	硫酸バリウム50%			硫酸バリウム50%	
色	グリーン			ブルー	
材質	スチレン系エラストマー(ラテックスフリー)			ポリプロピレン(ラテックスフリー)	


X線造影糸の写りについて

手術用ガーゼ類に使用されるX線造影糸は、術後の遺残確認に重要な役目を果たします。従来は可塑剤を含まず糸の強度の高いポリプロピレン製の青色造影糸が採用されていましたが、X線撮影の写りにおいては若干不鮮明な点が課題でした。


X線撮影写真への鮮明な写りを実現。

造影糸の成分を見直した緑色造影糸を新たに採用し、X線写真への鮮明な写りを可能にしました。拡大図で分るように、青色造影糸NEOは数十本の糸で構成されているため、細かい隙間ができ写りが不鮮明になってしまいますが、緑色造影糸Gの場合は、隙間がないのでより鮮明に写し出されます。


《GタイプとNEOタイプのX線写真》

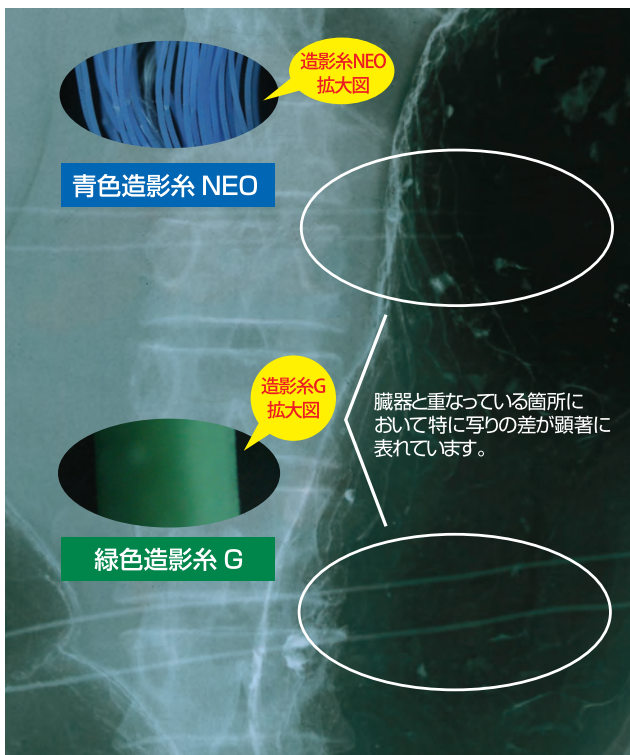


《G(W)タイプのX線写真》

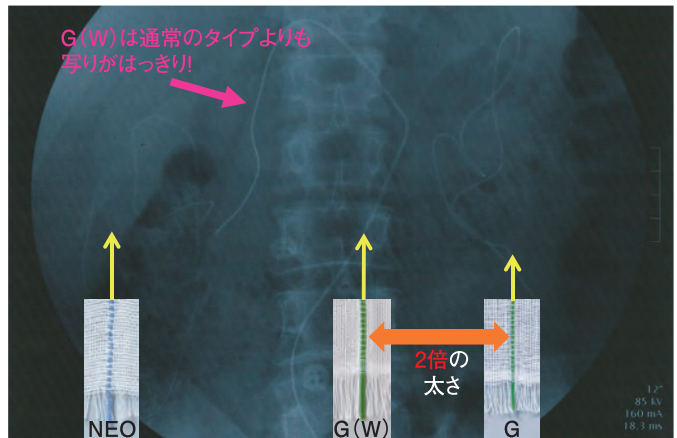

《GクリアのX線写真》

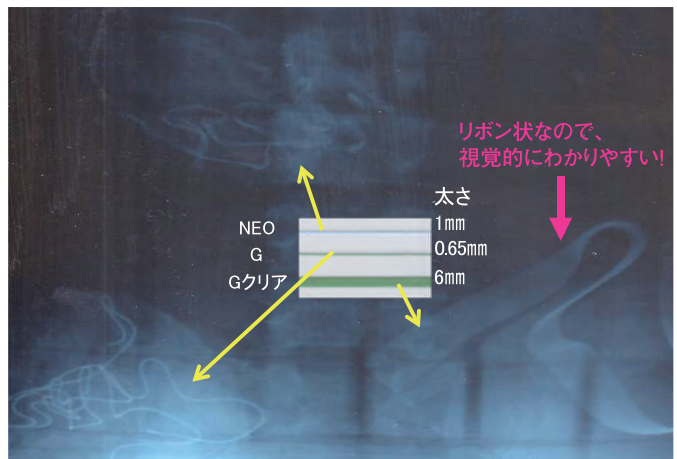

《球型製品のX線写真》

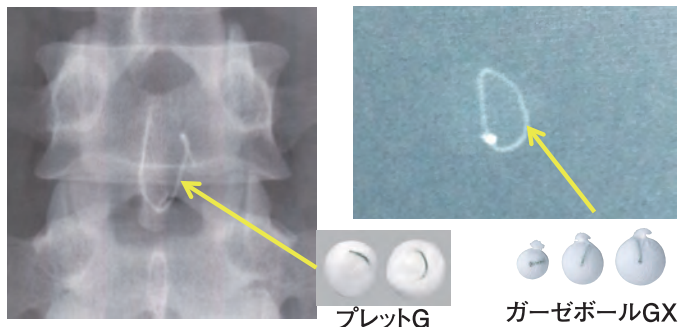

ハクゾウ滅菌オペガーゼG EOG滅菌済

【一般医療機器】 X線造影材入りガーゼ 届出番号 27B2X00243000024

手術時に使用するEOG滅菌済のX線造影材入りガーゼです。


製品規格：

▶4折10枚滅菌 ▶4折20枚滅菌 ▶4折30枚滅菌

※ご要望に応じて別注対応させていただきます。

使用例

- 開腹手術時に。
- 止血用などに。

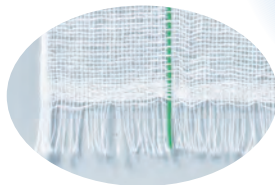

● 1枚あたりの重量が安定しており、出血量の測定が可能です。

ハクゾウオペガーゼG

【一般医療機器】 X線造影材入りガーゼ 届出番号 27B2X00243000016

未滅菌の X線造影材入りガーゼです。



製品規格：

▶平重ね 10枚紙入 ▶2折 20枚紙入 ▶4折 10枚紙入

※ご要望に応じて別注対応させていただきます。

使用例

- 開腹手術時に。
- 止血用などに。

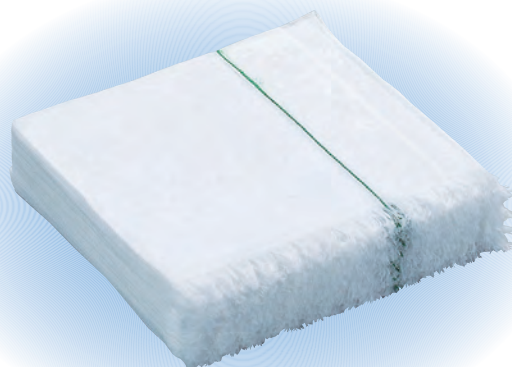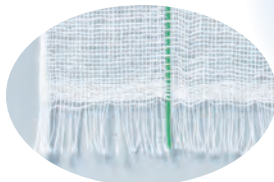

● 1枚あたりの重量が安定しており、出血量の測定が可能です。

ハクゾウオペガーゼ G (W)

【一般医療機器】 X線造影材入りガーゼ 届出番号 27B2X00243000016

X線造影糸を2本使用した未滅菌のオペガーゼです。造影糸を2本使用していることで、従来の製品よりも引っ張り強度があり、より鮮明な写りが期待できます。

製品規格：

▶平重ね 10枚紙入 ▶4折 10枚紙入

使用例

- 開腹手術時に。
- 止血用などに。



オペガーゼG



オペガーゼG(W)



オペガーゼG



オペガーゼG(W)

● 1枚あたりの重量が安定しており、出血量の測定が可能です。

ハクゾウ滅菌オペガーゼ NEO クロス EOG滅菌済

【一般医療機器】 X線造影材入りガーゼ 届出番号 27B2X00243000023

2本の青色 X線造影糸を縦と横の2方向にクロスさせ、より視認性を向上させた EOG 滅菌済のガーゼです。**(業界初の X線造影糸 4本入りガーゼです)**

製品規格：▶特殊折 10枚滅菌 ▶4折 10枚滅菌


▶4折 20枚滅菌 ▶4折 30枚滅菌

使用例

- 開腹手術時に。
- 止血用などに。



同じNEOタイプでも
2本入りが見やすい

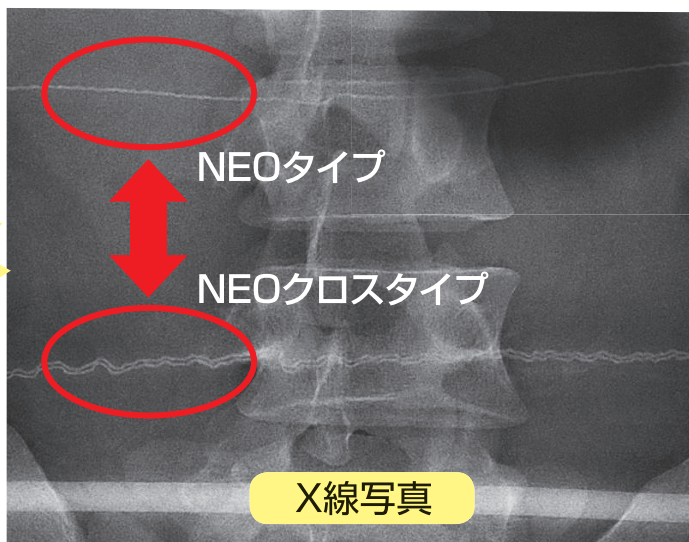

ハクゾウオペガーゼ NEO クロス

【一般医療機器】 X線造影材入りガーゼ 届出番号 27B2X00243000015

2本の青色 X線造影糸を縦と横の2方向にクロスさせ、より視認性を向上させた未滅菌のガーゼです。**(業界初の X線造影糸 4本入りガーゼです)**

製品規格：▶平重ね ▶2折 ▶4折

使用例

- 開腹手術時に。
- 止血用などに。







ハクゾウ滅菌ラパロガーゼ G EOG滅菌済

【一般医療機器】 X線造影材入りガーゼ 届出番号 27B2X00243000030

EOG 滅菌済の内視鏡手術時に使用する带状ガーゼです。

- 製品規格：
- ▶3号 × 15cm ▶3号 × 30cm
 - ▶5号 × 15cm ▶5号 × 30cm

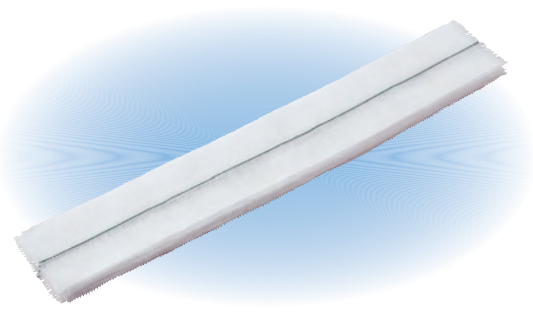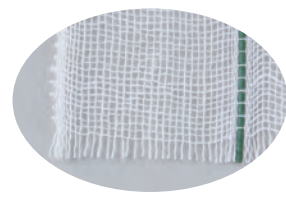


ハクゾウラパロガーゼ G

【一般医療機器】 X線造影材入りガーゼ 届出番号 27B2X00243000022

未滅菌の内視鏡手術時に使用する带状ガーゼです。

- 製品規格：
- ▶3号 × 15cm ▶3号 × 30cm ▶5号 × 15cm ▶5号 × 30cm


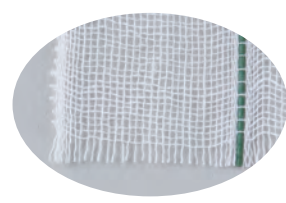


ハクゾウ滅菌ラパロガーゼ NEO EOG滅菌済

【一般医療機器】 X線造影材入りガーゼ 届出番号 27B2X00243000029

EOG 滅菌済の内視鏡手術時に使用する带状ガーゼです。

- 製品規格：
- ▶3号 × 15cm ▶3号 × 30cm
 - ▶5号 × 30cm

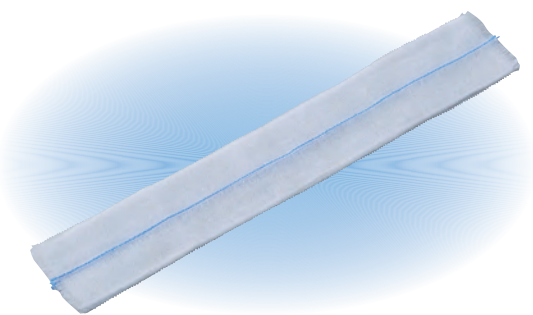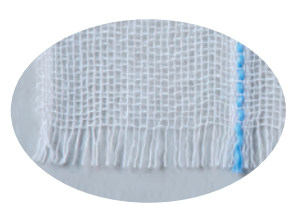


ハクゾウラパロガーゼ NEO

【一般医療機器】 X線造影材入りガーゼ 届出番号 27B2X00243000021

未滅菌の内視鏡手術時に使用する带状ガーゼです。

- 製品規格：
- ▶3号 × 15cm

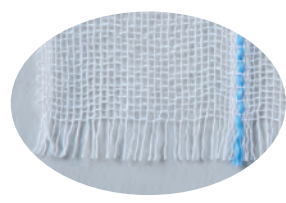

滅菌プレカウントガーゼ EOG滅菌済

手術前のガーゼカウントをより確実にする、さばきガーゼをホルダーに入れた滅菌ガーゼです。

【一般医療機器】X線造影剤入りガーゼ
届出番号 27B2X00243000024

サイズ：

- ▶30cm×30cm さばき 10枚2組入
- ▶10枚2組になっています。



滅菌済の状態

① X線造影糸

X線造影糸Gを使用しています。



オモテ面

③ 両面テープ付き

台などに貼り付けてご使用できます。



ウラ面

10枚1組を広げた状態

②ホルダーポケット番号

各ホルダーポケットに番号が印字されています。


④ 折り方を調整

ホルダーから取り出し易いようガーゼの折り方を調整。ガーゼの端が少し出るようにしました。


▶ご使用方法例



滅菌バッグを開封し、袋内の被滅菌物を取り出します。

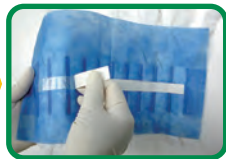

ホルダーを固定する場合は、裏面の両面テープの隔離紙を剥がします。

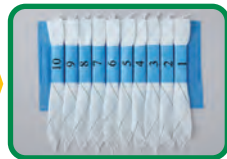

ホルダーを固定します。



ガーゼは○のどちらの端からでも取り出せます。



取り出すとさばいた状態となり、すぐご使用できます。

カウントラック

手術後の後カウントをより確実にするためのホルダーです。

サイズ：


- ▶19.5cm×6cm(1枚あたり)
- ▶4枚1組になっています。




▶ご使用方法例



溝と溝を入れて差し込みます。

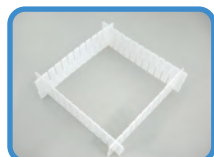


図のような状態に仕上げます。

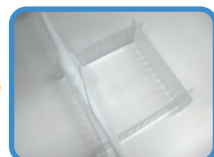

ガーゼの両端を持ち、左右の溝の位置がずれないように確認しながら差し込みます。



次に隣の溝に順次差し込んでいきます。

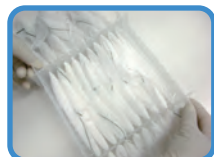

10枚以上ガーゼを入れる場合は、上下逆にして同様に差し込んでいきます。



使用后、両手でおさえながらつぶし、感染性廃棄物として捨てます。

- 1セットで最大20枚までガーゼカウントが可能。
- カウントが合わない場合でも、リカウントが一目で分かりスムーズに行える。
- 使用后、ガーゼを差し込んだままケースを折りたたんで廃棄が可能。

※ガーゼは、別売になっています。
※燃やしても、ダイオキシン類の有害物質は一切発生しません。



通常時（製品重量は約 20g）



ガーゼを入れた状態（2分割）

ハクゾウガーゼカウントトレイ

手術後のガーゼカウント用としてご使用いただくトレイです。

- ガーゼが 1 枚ずつしか入らない設計にしております。
- 2 分割でき、10 枚カウントトレイとしても使用できます。
- 割れにくい PP（ポリプロピレン）素材です。
- 製品重量は約 20g（2 分割時 約 10g）です。

サイズ：

▶ 255mm×210mm×35mm

ハクゾウ滅菌ハーフガーゼ G （X 線造影糸両端カット 熱圧着タイプ）



【一般医療機器】 X 線造影材入りガーゼ 届出番号 27B2X00243000026

30cm×15cm サイズの X 線造影材入りガーゼで、
造影糸部分を熱圧着で固定したものです。

- X 線造影糸の両端をカットし、さらに熱圧着する事で従来品より抜けにくい様に加工しています。

※本製品は受注生産品です。



ハクゾウハーフガーゼ G

【一般医療機器】 X 線造影材入りガーゼ 届出番号 27B2X00243000018

30cm×15cm サイズの X 線造影材入り
ガーゼです。

- X 線造影糸の両端をカットし、従来品より抜けにくい加工にしています。

※本製品は受注生産品です。

製品規格：▶平 10 枚紙入 X 線カット ▶2 折 10 枚紙入 X 線カット



ハクゾウオペガーゼ G クォーター

【一般医療機器】 X線造影材入りガーゼ 届出番号 27B2X00243000016

15cm×15cm サイズの X線造影材入りガーゼです。

- X線造影系の両端をカットし、従来品より抜けにくい加工にしています。
- ※本製品は受注生産品です。



ハクゾウ滅菌エレファーズ H EOG滅菌済


【一般医療機器】 届出番号 27B2X00243000008

販売名：ハクゾウ滅菌エレファーズ

新しい製造方法により、品質を向上した EOG 滅菌済の処置・手術用ガーゼです。

- 1枚当たりの重量が安定しており、出血量の測定が可能です。
- 規格品以外にも、折り方や滅菌バッグ入り（未滅菌）等、ご要望に応じて承ります。

※ご要望に応じて別注対応させていただきます。

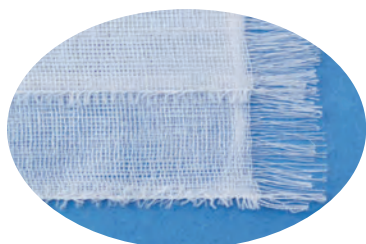

エレファーズ H

【一般医療機器】 届出番号 27B2X00243000001

販売名：エレファーズ

新しい製造方法により、品質を向上した未滅菌の処置・手術用ガーゼです。

- 1枚当たりの重量が安定しており、出血量の測定が可能です。
- 製品規格 ▶平 ▶2折 ▶4折 ▶8折

※ご要望に応じて別注対応させていただきます。



エレファーズ H ハーフ

【一般医療機器】 届出番号 27B2X00243000001

販売名：エレファーズ

30cm×15cm サイズの手術用ガーゼです。

- 1枚当たりの重量が安定しており、出血量の測定が可能です。
- 製品規格 ▶平 ▶2折 ▶4折


※ご要望に応じて別注対応させていただきます。

ハクゾウ滅菌エレファーフ EOG滅菌済

【一般医療機器】届出番号 27B2X00243000008
販売名：ハクゾウ滅菌エレファーフ

30cm×15cm サイズのEOG 滅菌済の手術用
ガーゼです。

- 1枚当たりの重量が安定しており、出血量の測定が可能です。

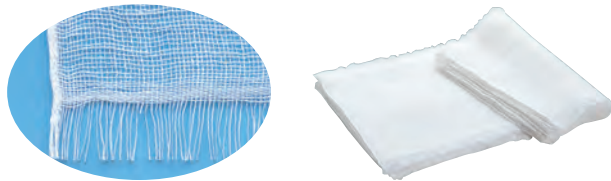

※ご要望に応じて別注対応させていただきます。




クォーターガーゼ S

【一般医療機器】届出番号 27B2X00243000007

15cm×15cm サイズの手術用ガーゼです。

- 1枚当たりの重量が安定しており、出血量の測定が可能です。


※ご要望に応じて別注対応させていただきます。

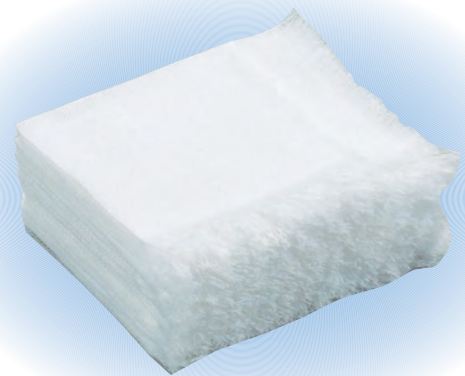

タンポンガーゼ

【一般医療機器】届出番号 27B2X00243000086

手術時や病棟処置及び耳鼻科等で使用する
挿入ガーゼです。

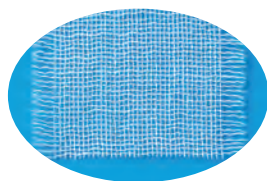


ニュータンポンガーゼ

【一般医療機器】届出番号 27B2X00243000087

タンポンガーゼを各サイズにカットしたものです。

- 四方乱糸抜きのできるガーゼなので安心してご使用いただけます。
 - 別注加工で規格品の折りたたみも承ります。
- ※本品は受注生産品です。

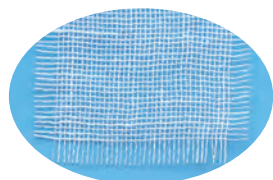

ハクゾウ滅菌メジャーゼ EOG滅菌済

【一般医療機器】 X線造影材入りスポンジ 届出番号 27B2X00243000162

目盛りが入った2枚合わせの滅菌済のハイブリッドガーゼです。ヘルニア門の大きさを1.5cm間隔で分類する2021年版鼠経ヘルニア分類(新JHS分類)に的確に対応できます。




- 目盛りを付けることで、腹腔鏡下手術でも組織、血管、切開部などのサイズを測定できます。
- 目盛りの長さの長短や5cmごとにT字にすることで目盛りの読み取りが容易です。
- ハイブリッドガーゼを使用しているため、通常のガーゼに比べ吸水力が高いです。
- 台形であるため、鋭角部を鉗子で操作すると5mmポートからも容易に通過します。
- X線写真への写りに優れた緑色造影系を使用しています。

主な使用用途： 製品規格：
腹腔鏡下手術、胸腔鏡下手術 2.5×21cm 2P 1枚滅菌

ガーゼに不織布をプラスした「ハイブリッドガーゼ」を使用。吸水力が向上し、通常のガーゼより1.7倍の吸水力

腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(TAPP法)での使用

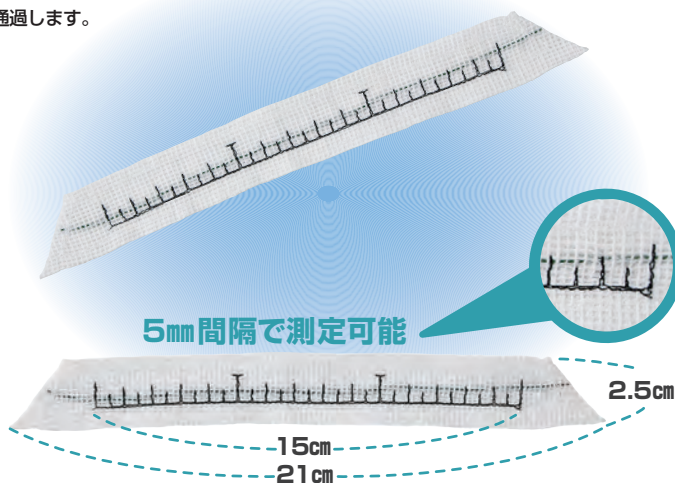

ハクゾウラパットGクリア(ヒモ付)

【一般医療機器】 X線造影材入りスポンジ 届出番号 27B2X00243000037
販売名：ハクゾウ滅菌ラパットG(ヒモ付)

手術後の遺残確認に重要な役目を果たすX線造影材を帯状にし、視認性を高めました。

- X線造影系Gに比べ、より鮮明な写りが得られ、容易に認識できます。
- X線造影材はやわらかい素材を使用しており、組織を傷付ける心配はありません。
- 開腹手術や帝王切開などの時の臓器保護、血液吸収などにご使用頂けます。
- 使用用途に合わせて、トレー入り・滅菌バッグ入りの製品をご用意しています。

※ご要望に応じて別注対応させていただきます。



滅菌バッグ入りタイプ




トレー入りタイプ(ロールタイプ)




トレー入りタイプ

※開腹手術や帝王切開などの時の臓器保護に、血液の吸収などにも使用できます。

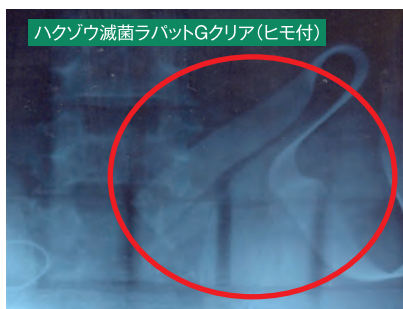

ハクゾウ滅菌ラパットGクリア(ヒモ付)

《X線造影材の太さ比較》

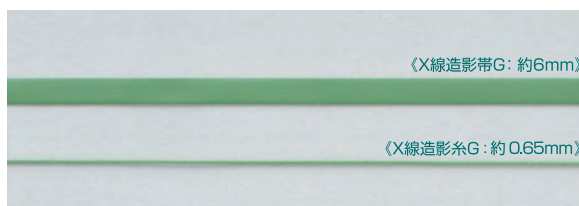

※帯状なので、視覚的にも分り易くなっており、X線造影系Gに比べより鮮明な写りが得られ、容易に認識できます。

TM ガーゼ

《ハクゾウ滅菌ラパット G (ヒモなし)》

【一般医療機器】 X線造影材入りスポンジ 届出番号 27B2X00243000046

手術支援ロボット対応用の EOG 滅菌済ガーゼです。

- EOG 滅菌済です。
- X線写真への写りに優れた緑色造影糸を使用しています。
- ※本製品は受注生産品です。

製品規格：▶20×5cm 4P 2折ずらし5枚滅菌



ハクゾウラパット G (ヒモ付)

【一般医療機器】 X線造影材入りスポンジ 届出番号 27B2X00243000037



販売名：ハクゾウラパット G(ヒモ付)

製品規格：

▶30cm×30cm 4P ▶45cm×45cm 4P

使用例

- 手術時の臓器保護、血液の吸収などに。

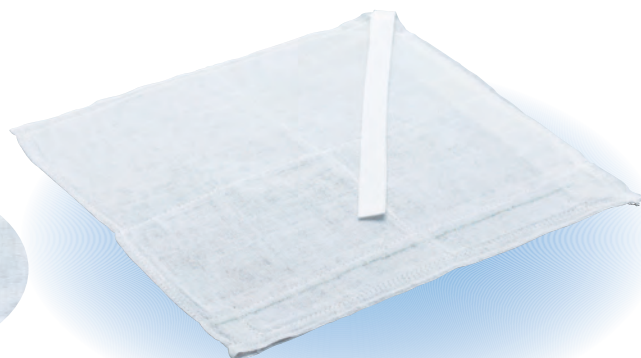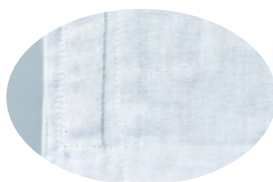

※ガーゼの合わせ枚数、サイズをご要望に応じて承ります。『ヒモなし』タイプもご用意しています。


エレファスポンジ (ヒモ付)

【一般医療機器】 開腹術用スポンジ 届出番号 27B2X00243000053

手術時の臓器保護、血液の吸収などの開腹術時に用いられる、X線造影糸なしの合わせガーゼです。

※本製品は受注生産品です。

製品規格：▶28cm×28cm 2P

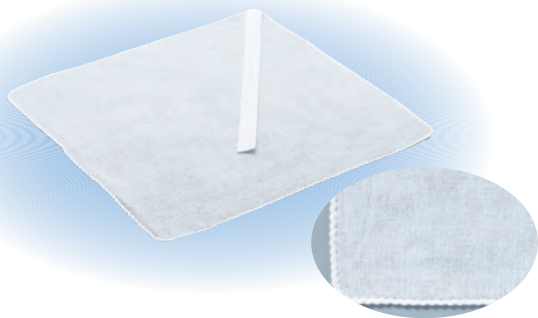


ハクゾウ合わせガーゼ (ヒモ付)

【一般医療機器】 開腹術用スポンジ 届出番号 27B2X00243000051

※本製品は受注生産品です。

製品規格：▶30cm×30cm 4P

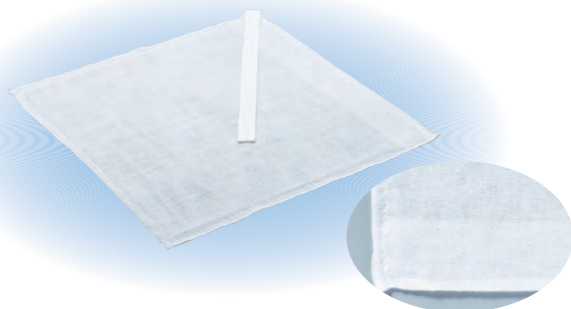

滅菌プレートG EOG滅菌済


【一般医療機器】X線造影材入りスポンジ
届出番号 27B2X00243000133

●綿球にX線造影糸を巻き、EOG滅菌したものです。



No.20-5球

No.14-10球

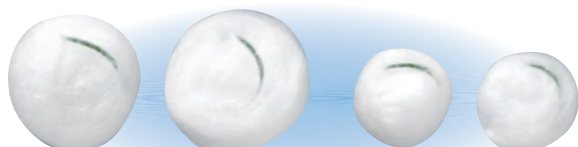

No.20

No.14

※ご要望に応じて別注対応させていただきます。

使用例

- 扁桃腺の手術などに。
- 救急外来で鼻血の止血などに。

ディオシートX EOG滅菌済

【一般医療機器】綿状パッド 届出番号 27B2X00243000142

脳外科手術用のX線造影糸入り不織布パッドです。

- パッドの素材はレーヨン100%で、軟らかく毛羽立ちが少ないです。
- レントゲン写りの良いX線造影糸を使用しております。
- 国内工場にて、包装・滅菌を行っております。

製品規格：▶10mm×10mm ▶10mm×20mm
▶15mm×50mm

【使用用途】

手術中の神経組織の保護、液の吸収、止血等にご使用ください。


【使用方法】

生理食塩水に浸してご使用ください。黒糸は留置防止用の目印としてご使用ください。



ガーゼボールGX EOG滅菌済

【一般医療機器】X線造影材入りスポンジ 届出番号 27B2X00243000068
販売名：滅菌ガーゼ巻きコットンG

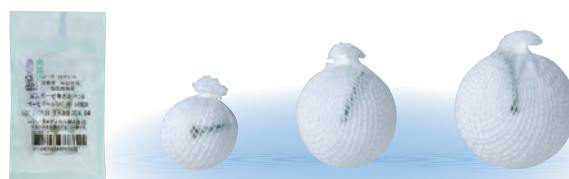

小

中

大

ツッペルG EOG滅菌済

【一般医療機器】X線造影材入りスポンジ 届出番号 27B2X00243000068
販売名：滅菌ガーゼ巻きコットンG



小

小

大

大

※X線造影糸の横向きタイプもございます。

【使用手順】



デオシート XJ EOG滅菌済

【一般医療機器】綿状パッド 届出番号 27B2X00243000159

脳外科手術用の滅菌済不織布シート(X線造影糸入り)です。

- パッドの素材は100%長繊維コットンのため毛羽立ちがほとんどなく、吸水性や保水性に優れています。
- 高い密着性で組織を保護します。
- レントゲンの写りの良いX線造影糸を使用しております。

製品規格：▶10mm×13mm ▶10mm×20mm ▶10mm×30mm
▶15mm×50mm
▶20mm×20mm ▶20mm×40mm
▶30mm×60mm

【使用用途】

手術中の神経組織の保護、液の吸収、止血等。



デオシート EOG滅菌済

【一般医療機器】綿状パッド 届出番号 27B2X00243000151

脳外科手術用の滅菌済不織布シート(X線造影糸なし)です。

- シートの素材は100%長繊維コットンのため毛羽立ちがほとんどなく、吸水性や保水性に優れています。
- 表面組織になじみやすく、剥離しやすくなっています。
- 豊富なサイズを取り揃えていますので、目的に応じて細かく使い分けができます。

製品規格：▶10mm×10mm ▶10mm×30mm
▶20mm×20mm ▶20mm×40mm
▶30mm×60mm ▶5mm×5mm ▶7mm×7mm

【使用用途】

手術中の神経組織の保護、液の吸収、止血等。



ハクゾウアイスティック EOG滅菌済

【一般医療機器】眼アプリーター 届出番号 27B2X00243000145

処置中の体液等を吸収し、術野を確保する為に使用する吸水スポンジ付きスティックです。

- 吸水部が大きいので、吸収量や吸水速度に優れています。
- スティック部分が太く、六角形になっており、把持しやすい形状となっています。また鑷子を使用する必要がなく、開封後速やかに使用することが可能です。
- 薬液使用量の無駄がありません。
- 綿棒の軸に薬液がつかず、使用者の手指が汚れません。





【サイズ】

吸水部：約8mm×16mm

全長：約幅85mm

【素材】

吸水部：セルロース スティック部：ポリプロピレン

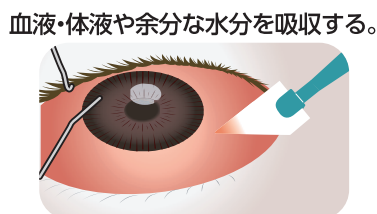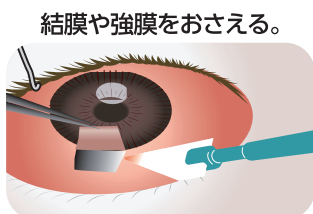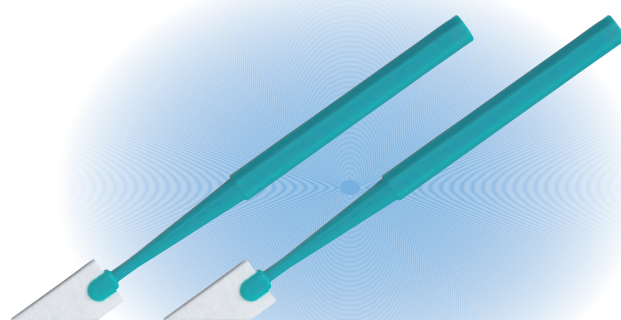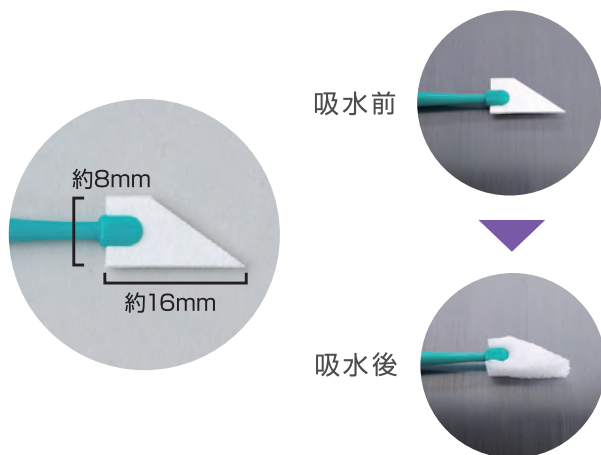

ハクゾウアイスポンジ EOG滅菌済

【一般医療機器】眼アプリーター 届出番号 27B2X00243000146

処置中の体液等を吸収し、術野を確保する為に使用する吸水スポンジです。


- 吸水部が大きいので、吸収量や吸水速度に優れています。

【サイズ】

吸水部：約8mm×16mm

【素材】

吸水部：セルロース

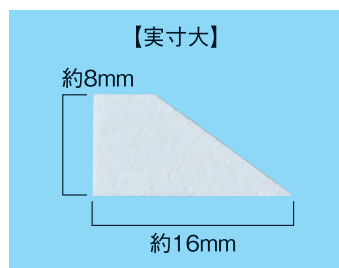


Dr.HUBY ポートクリーナー 医療用綿棒



【一般医療機器】 医科用捲綿子 届出番号 27B2X00243000157


ポートだけでなく、スコープもきれいにできる
内視鏡手術に特化した医療用綿棒です。

- トロッカーポート内壁の清掃を行う器具として業界初の医療機器クラス I を取得。
種々のベンチテストや生物学的安全性試験をクリアし、日本で初めて医療機器として認められた安全性、有効性に優れた商品です。
- 1本で2種類のポートに対応しており、片側しか清掃に使用しない場合でも、ポートだけでなくカメラのレンズを清掃することができ、無駄なく使用することができます。
- 吸水性に優れ、トロッカー内の血液や体液等の汚れをしっかりと吸収してきれいにします。
- 綿部を糊でコーティングしているため、脱落繊維がほとんどありません。
- 持ち手部分が紙軸だから”しっかり”とつかめ、操作性が優れています。
- 1本ずつ包装されているので低コスト、無駄がありません。
- 未開封時の使用期限：製造日から3年

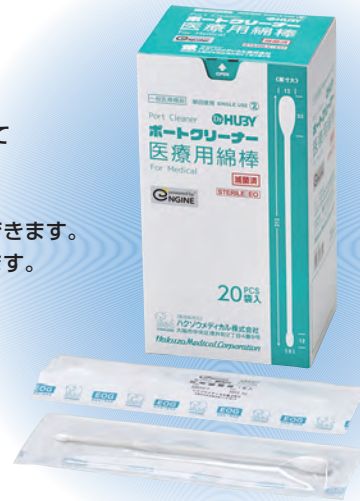

便利な2WAYタイプ

1本で2種類(12mm、5mm)のポートに対応しています。
あらゆるシーンで対応可能、内視鏡手術に1本あると便利です。

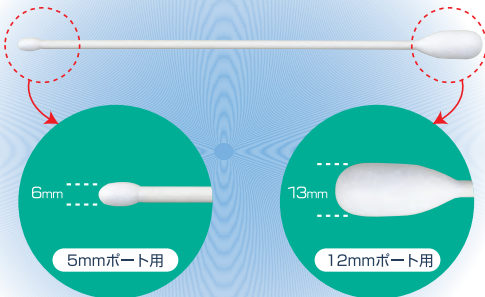

- ・Φ5mmカメラのみを使用する場合：吸水力の高い13mm側が未使用で残るので、カメラレンズの拭き取りに適しています。
- ・Φ10mmカメラのみを使用する場合：レンズの清掃だけでなく、曇り止めを塗った後、表面を拭き取るのに適しています。

【綿棒サイズ】

- ・5mm ポート用 (Φ 6mm×212mm)
- ・12mm ポート用 (Φ 13mm×212mm)

【原材料】 ※製品重量 1本あたり約5g

綿 球：脱脂綿 軸：紙 接着剤：ポリビニルアルコール、グリセリン

【使用上の注意】

- ※使用前若しくは使用中に生理食塩水等液体に浸さないでください。
- ※トロッカー内部を清掃後、脱脂綿が浸軟若しくは変形がある場合、継続使用を止め、新しい製品を使用してください。



大阪大学大学院医学系研究科 次世代内視鏡治療学
(プロジェクト ENGINE) と(株)山洋の共同開発品です。

サージポケット EOG滅菌済

【一般医療機器】 洗浄剤注入用具 届出番号 27B2X00243000166
販売名：創洗浄用粘着フィルム

創洗浄時に使用する洗浄保護用フィルムです。



- 手術中の創部洗浄用のポケットフィルムとして特許取得済

【素材】

- ・表面材：ナイロン/ポリエチレン
- ・粘着面：アクリル系粘着剤 (低刺激性)

【主な使用用途】

- ・開放手術、内視鏡手術の閉創前の洗浄
- ・外科的デブリードマン時の創部洗浄
- ・術後管理での創洗浄

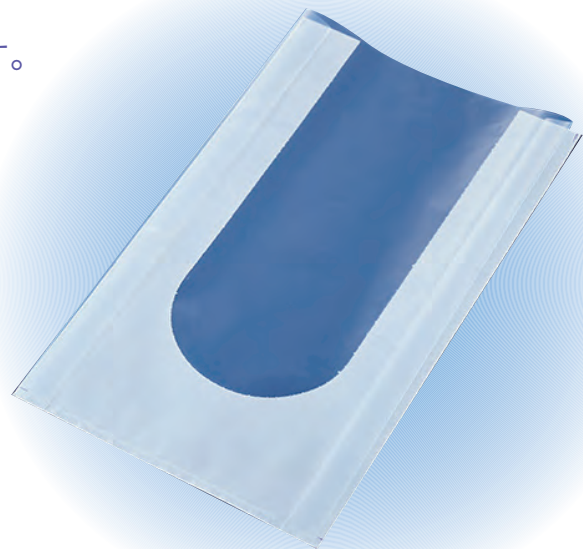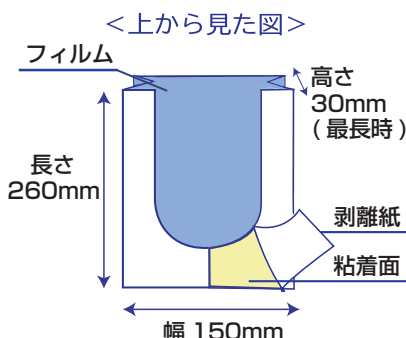

使用方法動画



本製品は大阪大学次世代内視鏡治療学講座 (中島清一先生) および同消化器外科学講座 (野田剛広先生) との共同開発品となります。

SS ボックス EOG滅菌済

必要な時に清潔な空間をつくりだせる
紙製滅菌ボックスです。

- カテーテルなどの長尺の物品を事前に準備することができます。
- 滅菌状態でも展開時の 10 分の 1 の厚みで保管することができます。
- 滅菌ドレープの様な平面の清潔野ではなく、立体の清潔野をつくりだすことができます。
- 清潔野を内部に形成するための組立容器として特許取得済


【組み立て時の寸法】

300mm×360mm 高さ100mm

【主な使用用途】

IVR、救急、創処置やCV挿入、外来小手術などでの清潔野の確保

使用手順

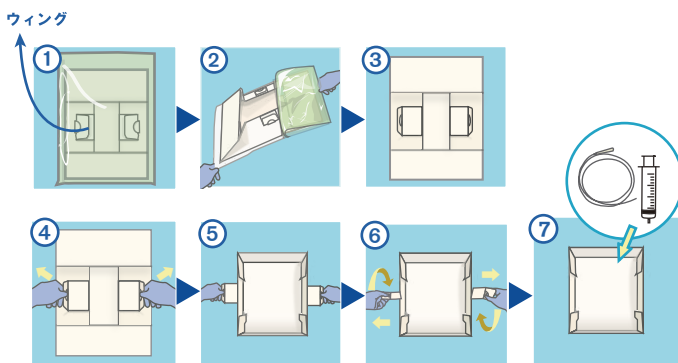

本製品は大阪大学次世代内視鏡治療学講座（中島清一先生）および放射線医学（東原大樹先生）との共同開発品となります。

ラパロパーム EOG滅菌済

【一般医療機器】鏡視下手術用臓器圧排スポンジ 届出番号 27B2X00243000167

- 一般的な両開き鉗子（腸把持鉗子等）と一体化させることで、様々な場面でフレキシブルに使用できるリトラクターです。
- セルローススポンジ材でできており、生理食塩水を滴下することで膨潤、浸軟し、愛護的かつズレのない安定した圧排作用を発揮します。
- 視認性の高いX線造影材を使用しています。



【サイズ】
6.8cm×5.8cm



本製品は大阪大学次世代内視鏡治療学講座（中島清一先生）との共同開発品になります。

エレファドレープ EOG滅菌済

【一般医療機器】届出番号 27B1X00114000014
販売名：単回使用汎用サージカルドレープ

手術・処置などに使用する吸水・防水タイプの
滅菌ドレープです。

《エレファドレープ》



《規格・サイズ》

- ・HZ-606(60cm×60cm)
- ・HZ-909(90cm×90cm)
- ・HZ-912(90cm×120cm)
- ・HZ-1212(120cm×120cm)

《エレファ器械台カバー》



《規格・サイズ》

- ・HZKC-1215(120cm×150cm)
 - ・HZKC-1518(150cm×180cm)
- ※仮固定用テープ付き

滅菌ストッキネット・アール EOG滅菌済

患部全体を保護するための、チューブタイプの
ホータイです。

- すぐ使用できるようにくるくる巻いたタイプです。
 - ご希望に応じたサイズを承ります。
- ※滅菌処理をするとサイズが多少前後する場合がございます。
※本製品は受注生産品です。



ウエットプレート® No.40

【指定医薬部外品】承認番号 21500DZZ01525000
10%ポビドンヨード液を含浸した
消毒用綿球です。

- 薬液が規格ごとで適量含まれている為、
使いすぎなどの無駄がありません。

製品規格

- ▶ No.40-3球 (液量：105mL)
- ▶ No.40-5球 (液量：175mL)



滅菌シンプルタイ EOG滅菌済

- 衛生的にご使用いただけます。
- ラテックスフリーです。

製品規格

- ▶ 5cm× 伸長 9m ▶ 7.5cm× 伸長 9m
- ▶ 9cm× 伸長 9m



滅菌フランチタイ EOG滅菌済

- 衛生的にご使用いただけます。
- ラテックスフリーです。

製品規格

- ▶ 5cm× 伸長 9m ▶ 7.5cm× 伸長 9m
- ▶ 9cm× 伸長 9m




滅菌ハードタイ G EOG滅菌済

- 衛生的にご使用いただけます。
- ラテックスフリーです。

製品規格

- ▶ 5cm× 伸長 4.5m ▶ 7.5cm× 伸長 4.5m
- ▶ 10cm× 伸長 4.5m

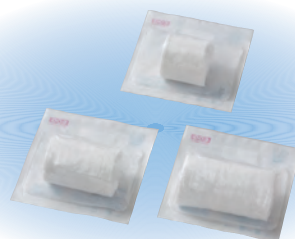

その他、手術用関連製品のご紹介

ネオフラックスS ハイソックスタイプ

脚部の血行促進を
目的とした弾性ストッキングです。

- 圧迫力は足首部分が最大で、膝下・大腿部に向かって段階的に弱くし静脈還流の改善を促します。
- サイズが豊富で、着用される方の脚に合った適切なサイズを選択することができます。
- 足底部分に血行状態を観察するための穴があります。
- 長さやサイズを判別し易いように足底の穴と上端部を色分けしています。

※肺血栓症予防管理科として弾性ストッキングなどを使用した場合は305点算定できます。
(2024年4月診療報酬改定時)



(ハイソックスタイプ)

【一般医療機器】弾性ストッキング
届出番号 13B2X00187000003



ハクゾウ爽やか清潔タオル

- 水が含浸されている清拭用タオルです。
- 大判と小判タイプがあります。
- プレーンタイプの厚手の不織布で、良い肌触りです。



《小判タイプ 30cm×30cm》

《大判タイプ 23.5cm×60cm》

ハクゾウすっきりタオル

- メッシュタイプとエンボスタイプの2種類があります。
- 水が含浸されている清拭用タオルです。
- 規格が豊富にあります。



《エンボスタイプ 28cm×60cm》

《メッシュタイプ 28cm×60cm》
《メッシュタイプ 28cm×30cm》
《メッシュタイプ 28cm×18cm》

ハクゾウうるおいケアタオル

- 使い捨てのため、清潔で交差感染のリスクを低減できます。
- しっかり拭ける、厚手・エンボスタイプの不織布です。
- 4種の保湿成分配合で拭きあがりがかしっとりします。



《L大判厚手タイプ 28cm×60cm》

《M中判厚手タイプ 28cm×30cm》

メディカルディスプレイーツ

多目的に使用できる薄型で高吸収な
ディスプレイーツです。

- 吸収面の逆面は防水フィルムを使用していますので、漏れを防ぎます。
- 高吸収ポリマーで逆戻りを抑え、表面はサラッとしています。
- 5種類ございますので、用途に合わせてご使用頂けます。



約 60cm×90cm

約 90cm×120cm

約 90cm×200cm

約 45cm×60cm

約 90cm×90cm



吸収面

防水面

[吸収量] ※生理食塩水での試験結果
約 45cm×60cm : 約 1,200mL
約 60cm×90cm : 約 2,300mL
約 90cm×90cm : 約 3,500mL
約 90cm×120cm : 約 4,500mL
約 90cm×200cm : 約 8,200mL

災害用関連製品のご紹介 (創傷処置用製品)

災害時には創傷処置、熱傷処置、骨折処置が多くを占めると考えられるため、以下のような物品を処置ごと又はキット製品として事前に準備しておくことが望ましいと考えられます。



《消毒剤製品》



《滅菌ガーゼ》



《滅菌ドレッシングフィルム》



《処置セット》




《プラスチックピンセット》




《伸縮・弾力ホータイ》



《自着性ホータイ》

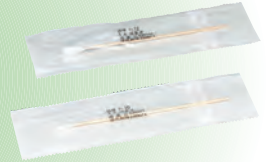

《滅菌綿棒》

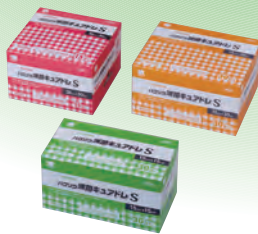

《高吸収薄型当てパッド》



《創傷保護用吸収パッド》

災害用関連製品のご紹介 (衛生材料)

災害時には多くの外来患者の対応に時間が当てられるため、環境を衛生的に保つことが困難になります。そこで準備の手間が省けるような感染対策製品を備蓄することが望ましいと考えられます。



《ディスポーザブルグローブ》



《サージカルマスク》



《フェイスシールド》



《ディスポーザブルエプロン》



《ディスポーザブルガウン》



《身体清拭用タオル》



《環境清拭用クロス》

製品規格表

手術用関連製品

品名	品番	種類・規格	包装	1梱入数	JANコード
ハクソウ滅菌オペガーゼ G	2336033	4折 10枚滅菌 30cm×30cm	10枚/袋×20袋	4箱	4958286720067
	2336034	4折 20枚滅菌 30cm×30cm	20枚/袋×10袋	4箱	4958286720074
	2336035	4折 30枚滅菌 30cm×30cm	30枚/袋×6袋	4箱	4958286720081
ハクソウオペガーゼ G	1156941	平重ね 10枚紙入 30cm×30cm	300枚/包	10包	4958286713885
	1156943	2折 10枚紙入 30cm×30cm	300枚/包	10包	4958286713908
	1156945	4折 10枚紙入 30cm×30cm	300枚/包	10包	4958286713922
ハクソウオペガーゼ G (W)	1156942	平重ね 10枚紙入 30cm×30cm	300枚/包	10包	4958286713892
	1156946	4折 10枚紙入 30cm×30cm	300枚/包	10包	4958286713939
ハクソウ滅菌オペガーゼ NEO クロス	1156310	特殊折り 10枚滅菌 30cm×30cm	10枚/袋×10袋	6箱	4958286712154
	1156401	4折 10枚滅菌 30cm×30cm	10枚/袋×20袋	6箱	4958286081632
	1156403	4折 30枚滅菌 30cm×30cm	30枚/袋×30袋	6箱	4958286719856
	1156420	4折 20枚滅菌 30cm×30cm	20枚/袋×10袋	6箱	4958286712130
ハクソウオペガーゼ NEO クロス	1156800	平重ね 30cm×30cm	300枚/包	10包	4958286715018
	1156802	2折 30cm×30cm	300枚/包	10包	4958286712161
	1156804	4折 30cm×30cm	300枚/包	10包	4958286073910
ハクソウ滅菌ラバロガーゼ G	2334000	3号×15cm 約3cm×15cm 4折	5枚/袋×100袋	-	4958286712772
	2334001	3号×30cm 約3cm×30cm 4折	5枚/袋×100袋	-	4958286712789
	2334100	5号×15cm 約5cm×15cm 4折	5枚/袋×100袋	-	4958286712901
	2334101	5号×30cm 約5cm×30cm 4折	5枚/袋×100袋	-	4958286712918
ハクソウラバロガーゼ G	2334200	3号×15cm 約3cm×15cm 平	100枚/袋	-	4958286712796
	2334202	3号×30cm 約3cm×30cm 平	100枚/袋	-	4958286712802
	2334300	5号×15cm 約5cm×15cm 平	100枚/袋	-	4958286712864
	2334301	5号×30cm 約5cm×30cm 平	100枚/袋	-	4958286712871
ハクソウ滅菌ラバロガーゼ NEO	2335000	3号×15cm 約3cm×15cm 4折	5枚/袋×100袋	-	4958286712819
	2335001	3号×30cm 約3cm×30cm 4折	5枚/袋×100袋	-	4958286712826
	2335101	5号×30cm 約5cm×30cm 4折	5枚/袋×100袋	-	4958286712932
ハクソウラバロガーゼ NEO	2335200	3号×15cm 約3cm×15cm 平	100枚/袋	-	4958286712833
滅菌プレカウントガーゼ	1153642	30cm×30cm さらき 10枚 2組入	10枚2組/袋	50袋	4958286153254
カウントラック	1153630	19.5cm×6cm(1枚入)	4枚/セット×100セット	-	4958286701615
ハクソウガーゼカウントトレ	3000404	255mm×210mm×35mm	50枚/袋	4袋	4958286709550
ハクソウ滅菌ハーフガーゼ G	1152826	30cm×15cm 2折 X線カット 熱圧着 ずらし 5枚滅菌	5枚/袋×50袋/箱	-	4958286061306
ハクソウハーフガーゼ G	1156979	平 10枚紙入 X線カット 30cm×15cm	600枚入	-	4958286715568
	1156980	2折 10枚紙入 X線カット 30cm×15cm	600枚入	-	4958286715575
ハクソウオペガーゼ G クォーター	1156978	15cm×15cm 平 X線カット	1,200枚入	20包	4958286715551
ハクソウ滅菌エレファーズ H	2330205	2折 5枚滅菌 30cm×30cm	5枚/袋×20袋	12箱	4958286710815
	2330210	2折 10枚滅菌 30cm×30cm	10枚/袋×10袋	12箱	4958286710822
	2330220	2折 20枚滅菌 30cm×30cm	20枚/袋×10袋	6箱	4958286710839
	2330402	4折 2枚滅菌 30cm×30cm	2枚/袋×30袋	12箱	4958286710877
	2330403	4折 3枚滅菌 30cm×30cm	3枚/袋×30袋	12箱	4958286710884
	2330405	4折 5枚滅菌 30cm×30cm	5枚/袋×20袋	12箱	4958286710891
	2330410	4折 10枚滅菌 30cm×30cm	10枚/袋×10袋	12箱	4958286710846
	2330420	4折 20枚滅菌 30cm×30cm	20枚/袋×10袋	6箱	4958286710853
	2330430	4折 30枚滅菌 30cm×30cm	30枚/袋×8袋	6箱	4958286710860
	2330801	8折 1枚滅菌 30cm×30cm	1枚/袋×60袋	12箱	4958286710747
	2330802	8折 2枚滅菌 30cm×30cm	2枚/袋×30袋	12箱	4958286710754
	2330803	8折 3枚滅菌 30cm×30cm	3枚/袋×30袋	12箱	4958286710761
	2330805	8折 5枚滅菌 30cm×30cm	5枚/袋×20袋	12箱	4958286710778
	2330810	8折 10枚滅菌 30cm×30cm	10枚/袋×10袋	12箱	4958286710785
	2330161	16折 1枚滅菌 30cm×30cm	1枚/袋×50袋	12箱	4958286710792
	2330162	16折 2枚滅菌 30cm×30cm	2枚/袋×25袋	12箱	4958286710808
エレファーズ H	2330000	平 30cm×30cm	300枚/包	10包	4958286710624
	2330002	2折 30cm×30cm	300枚/包	10包	4958286710631
	2330004	4折 30cm×30cm	300枚/包	10包	4958286710648
	2330008	8折 30cm×30cm	300枚/包	10包	4958286710693

品名	品番	種類・規格	包装	1梱入数	JANコード
エレファーズHハーフ	2330010	平 30cm×15cm	600枚/包	10包	4958286717852
	2330012	2折 30cm×15cm	600枚/包	10包	4958286717869
	2330014	4折 30cm×15cm	600枚/包	10包	4958286717876
ハクソウ滅菌エレファーズHハーフ	2331000	2折5枚滅菌 30cm×15cm	5枚/袋×30袋	12箱	4958286718798
	2331001	2折10枚滅菌 30cm×15cm	10枚/袋×20袋	12箱	4958286718804
	2331002	2折20枚滅菌 30cm×15cm	20枚/袋×10袋	12箱	4958286718811
	2331003	2折30枚滅菌 30cm×15cm	30枚/袋×7袋	12箱	4958286718828
クォーターガーゼS	1156940	平 15cm×15cm	1,200枚/包	20包	4958286713687
タンボンガーゼ	1700001	1号 巾1cm×長さ40m	10本/包	-	4958286152059
	1700002	1.5号 巾1.5cm×長さ40m	10本/包	-	4958286152066
	1700003	2号 巾2cm×長さ40m	10本/包	-	4958286151038
	1700004	2.5号 巾2.5cm×長さ40m	10本/包	-	4958286152073
	1700005	3号 巾3cm×長さ40m	10本/包	-	4958286133003
	1700006	4号 巾4cm×長さ40m	10本/包	-	4958286151045
	1700007	5号 巾5cm×長さ40m	10本/包	-	4958286150116
	1700010	8号 巾8cm×長さ40m	10本/包	-	4958286152721
ハクソウ滅菌メジャーゼ	2650000	2.5cm×21cm 2P 1枚滅菌 60袋入	60袋/箱	12箱入	4958286080215
ハクソウラバットGクリア(ヒモ付)	2336015	30cm×30cm 4Pクリア平 50枚入	-	10袋	4958286715797
TMガーゼ	2267995	20cm×5cm 4P 2折ずらし 5枚滅菌	20袋/箱	6箱	4958286063140
ハクソウラバットG(ヒモ付)	1156902	30cm×30cm 4P	50枚/包	-	4958286713403
	1156905	45cm×45cm 4P	50枚/包	-	4958286713434
エレファスポンジ(ヒモ付)	2163202	28cm×28cm 2P	50枚/包	-	4958286713403
ハクソウ合わせガーゼ(ヒモ付)	1157070	30cm×30cm 4P	50枚/包	-	4958286718651
滅菌プレットG	1283120	No.14 5球滅菌 DD1F①	40袋/箱	6箱	4958286079592
	1283121	No.14 10球滅菌 DD1F③	40袋/箱	6箱	4958286079608
	1283122	No.20 5球滅菌 DD1F②	40袋/箱	4箱	4958286079615
	1283123	No.20 10球滅菌 DD1F②	25袋/箱	4箱	4958286079622
ガーゼボールGX	2270275	大・5球滅菌済 直径約16mm	5球×10袋/箱	-	4958286060965
	2270276	中・5球滅菌済 直径約14mm	5球×20袋/箱	-	4958286060972
	2270277	小・5球滅菌済 直径約10mm	5球×20袋/箱	-	4958286060989
	2270265	大・100球PE袋入 直径約16mm	100球/袋	-	4958286060866
	2270266	中・100球PE袋入 直径約14mm	100球/袋	-	4958286060873
	2270267	小・100球PE袋入 直径約10mm	100球/袋	-	4958286060880
ツッパルG	2270204	大・5球滅菌済 約7mm×15mm	5球×10袋/箱	-	4958286041315
	2270205	小・5球滅菌済 約7mm×10mm	5球×20袋/箱	-	4958286041322
	1898320	大・100球袋入 約7mm×15mm	100球×袋	-	4958286719627
	1898319	小・100球袋入 約7mm×10mm	100球×袋	-	4958286719610
デオシートX	2640101	10mm×10mm	1組入/袋×20袋/箱	-	4958286061214
	2640102	10mm×20mm	1組入/袋×20袋/箱	-	4958286061221
	2640103	15mm×50mm	1組入/袋×10袋/箱	-	4958286061238
デオシートXJ	2640121	10mm×13mm	20袋/箱	-	4958286081908
	2640122	10mm×30mm	20袋/箱	-	4958286081915
	2640123	20mm×20mm	20袋/箱	-	4958286081922
	2640124	20mm×40mm	20袋/箱	-	4958286081939
	2640125	30mm×60mm	20袋/箱	-	4958286081946
	2640126	10mm×20mm	20袋/箱	-	4958286083315
	2640127	15mm×50mm	20袋/箱	-	4958286083322
デオシート	2640203	10mm×10mm	10枚台紙巻1組入/袋	20袋/箱×12箱	4958286074528
	2640204	10mm×30mm	10枚台紙巻1組入/袋	20袋/箱×12箱	4958286074535
	2640205	20mm×20mm	10枚台紙巻1組入/袋	20袋/箱×12箱	4958286074542
	2640206	20mm×40mm	10枚台紙巻1組入/袋	20袋/箱×12箱	4958286074559
	2640207	30mm×60mm	10枚台紙巻1組入/袋	20袋/箱×12箱	4958286074566
	2640201	5mm×5mm	10枚台紙巻1組入/袋	20袋/箱×12箱	4958286074504
	2640202	7mm×7mm	10枚台紙巻1組入/袋	20袋/箱×12箱	4958286074511
ハクソウアイススティック	2600400	-	5本/袋×20袋	12箱	4958286072203
ハクソウアイスポンジ	2600401	-	10個/袋×40袋	12箱	4958286072791
Dr.HUBY ポートクリーナー 医療用綿棒	1240618	1本入	20袋/箱	16箱	4958286078892
サージポケット	3155100	150mm×260mm 1枚滅菌	10袋/箱	10箱	4958286719863
SSボックス	1490550	300mm×360mm 1枚滅菌	10袋/箱	5箱	4958286081649
ラバロバーム	2650100	68mm×58mm 1枚入	1枚/袋×10袋/箱	24箱/ケース	4958286080970

品名	品番	種類・規格	包装	1梱入数	JANコード
エレファドレーブ	3183001	HZ-606 60cm×60cm	-	50枚×4箱	4958286701417
	3183002	HZ-909 90cm×90cm	-	50枚×2箱	4958286701424
	3183012	HZ-912 90cm×120cm	-	50枚×2箱	4958286706603
	3183003	HZ-1212 120cm×120cm	-	50枚×2箱	4958286701431
エレファ器械台カバー	3183004	HZKC-1215 120cm×150cm	1枚	25枚×2箱	4958286701448
	3183005	HZKC-1518 150cm×180cm	1枚	20枚×2箱	4958286701455
滅菌ストッキネット・アール	1052512	3号×60cm 1個滅菌	30袋/箱	6箱	4958286077895
	1052514	3号×100cm 1個滅菌	30袋/箱	6箱	4958286077918
	1052518	4号×100cm 1個滅菌	10袋/箱	8箱	4958286077956
	1052519	4号×120cm 1個滅菌	10袋/箱	8箱	4958286077963
	1052520	4号×150cm 1個滅菌	10袋/箱	8箱	4958286077970
	1052523	5号×100cm 1個滅菌	10袋/箱	6箱	4958286078007
	1052524	5号×120cm 1個滅菌	10袋/箱	6箱	4958286078014
	1052525	5号×150cm 1個滅菌	10袋/箱	6箱	4958286078021
ウエットプレットNo.40	2624003	No.40 3球 直径約40mm	3球/個×12個/箱	3箱	4958286061757
	2624005	No.40 5球 直径約40mm	5球/個×12個/箱	3箱	4958286057408
滅菌シンプルタイ	1030021	5cm×伸長9m 1巻滅菌	10袋/箱	12箱	4958286066301
	1030022	7.5cm×伸長9m 1巻滅菌	10袋/箱	12箱	4958286066318
	1030023	9cm×伸長9m 1巻滅菌	10袋/箱	12箱	4958286066325
滅菌フランスタイ	1020031	5cm×伸長9m 1巻滅菌	10袋/箱	12箱	4958286066271
	1020032	7.5cm×伸長9m 1巻滅菌	10袋/箱	12箱	4958286066288
	1020033	9cm×伸長9m 1巻滅菌	10袋/箱	12箱	4958286066295
滅菌ハードタイG	1040041	2号 5cm×伸長4.5m 1巻滅菌	8袋/箱	12箱	4958286066332
	1040042	3号 7.5cm×伸長4.5m 1巻滅菌	8袋/箱	12箱	4958286066349
	1040043	4号 10cm×伸長4.5m 1巻滅菌	8袋/箱	12箱	4958286066356

》》》 その他、手術用関連製品のご紹介

品名	品番	種類・規格	包装	1梱入数	JANコード
ネオフラックスS (ハインソックスタイプ)	2700120	レギュラーSS	1組/袋×10組/箱	-	4958286410326
	2700121	レギュラーS	1組/袋×10組/箱	-	4958286410272
	2700122	レギュラーM	1組/袋×10組/箱	-	4958286410289
	2700123	レギュラーL	1組/袋×10組/箱	-	4958286410296
	2700124	レギュラーLL	1組/袋×10組/箱	-	4958286410302
ハクソウ爽やか清潔タオル	3394081	大判 23.5cm×60cm	50本/袋	10袋	4958286601335
	3394082	小判 30cm×30cm	100本/袋	8袋	4958286601328
ハクソウすっきりタオル	3081100	小判厚手(メッシュ) 280mm×180mm	100本/袋	12袋	4958286715520
	3081101	中判厚手(メッシュ) 280mm×300mm	100本/袋	10袋	4958286715483
	3081102	大判厚手(メッシュ) 280mm×600mm	50本/袋	6袋	4958286715490
	3081103	大判(エンボス) 280mm×600mm	50本/袋	8袋	4958286715506
ハクソウうるおいケアタオル	2601000	M中判厚手 280mm×300mm	100本/袋	6袋	4958286082059
	2601001	L大判厚手 280mm×600mm	50本/袋	6袋	4958286082066
ハクソウメディカルディスプレイシート	3096000	約45cm×60cm	50枚/袋	4袋/ケース	4958286712970
	3096001	約60cm×90cm	20枚/袋	4袋/ケース	4958286712987
	3096002	約90cm×90cm	10枚/袋	6袋/ケース	4958286712994
	3096003	約90cm×120cm	10枚/袋	4袋/ケース	4958286713007
	3096004	約90cm×200cm	10枚/袋	3袋/ケース	4958286713014

本社

〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451(代) FAX. 06-6945-0539



メディカル・介護部門

東京支店

〒136-0082 東京都江東区新木場2丁目9番7号
TEL. 03-3522-6720(代) FAX. 03-3521-1319

北大阪支店

〒566-0064 大阪府摂津市鳥飼中2丁目6番26号
TEL. 072-653-4045(代) FAX. 072-653-4046

南大阪支店

〒584-0031 大阪府富田林市寿町4丁目8番15号
TEL. 0721-20-2900(代) FAX. 0721-25-3870

仙台営業所

〒981-1226 宮城県名取市植松字田野部93-1
TEL. 022-393-7434(代) FAX. 022-393-7435

関東営業所

〒123-0861 東京都足立区加賀1丁目19-9
TEL. 03-5809-4780 FAX. 03-5809-4781

西東京営業所

〒192-0045 東京都八王子市大和田町1丁目22番4号
TEL. 042-646-0451(代) FAX. 042-646-0452

名古屋支店

〒463-0037 愛知県名古屋守山区天子田四丁目501-2
TEL. 052-769-6021 FAX. 052-769-6022

三重営業所

〒510-0064 三重県四日市市新正4丁目15番3号
TEL. 059-350-3844(代) FAX. 059-350-3845

京都営業所

〒612-8123 京都府京都市伏見区向島立河原町75番2号
TEL. 075-603-4826(代) FAX. 075-603-4827

大阪中央営業所

〒540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋3番6号
TEL. 06-6943-6118(代) FAX. 06-6943-6106

神戸営業所

〒651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋591-1
TEL. 078-940-8975 FAX. 078-940-8976

阪神営業所

〒658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町134番地
TEL. 078-262-1634(代) FAX. 078-411-4110

広島営業所

〒731-3167 広島県広島市安佐南区大塚西5丁目3番27号
TEL. 082-849-4188(代) FAX. 082-849-4190

福岡営業所

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目9番25号 アバダント84 302号室
TEL. 092-481-5921(代) FAX. 092-481-5922

熊本営業所

〒860-0863 熊本県熊本市中央区坪井6丁目8番1号
TEL. 096-345-2253(代) FAX. 096-345-2256

札幌駐在所

〒001-0909 北海道札幌市北区新琴似9条7丁目8番19号
TEL. 011-788-8009 FAX. 011-788-8027

沖縄駐在所

〒900-0003 沖縄県那覇市安謝1丁目13番19号 エミメントヒロ106号
TEL. 098-941-5320(代) FAX. 098-941-5321

コンシューマー部門

コンシューマー課 東京オフィス

〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-8 FPG links KYOBASHI R705
(ビジネスエアポート京橋)
TEL. 072-955-3305 FAX. 072-955-3306

コンシューマー課 大阪オフィス

〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451(代) FAX. 06-6945-0539

大阪物流センター

〒583-0866 大阪府羽曳野市埴生野1111
TEL. 072-955-3305 FAX. 072-955-3306

阪神物流センター

〒658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町134番地
TEL. 078-262-1734(代) FAX. 078-411-4110

R&D Base

〒540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋3番6号
TEL. 06-6948-8707(代)

ハクゾウメディカルテクノス株式会社

熊本工場

〒861-1367 熊本県菊池市七城町流川205
TEL. 0968-25-3793(代) FAX. 0968-25-3913

福島工場

〒976-0005 福島県相馬市光陽2丁目2番1号
TEL. 0244-26-5148(代) FAX. 0244-38-6625

Hakuzo Medical Asia Co., Ltd

バンコク事務所

399 Interchange 21 Building, Level 20 Unit 2003, Sukhumvit
Road, North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110 Thailand
TEL. +66-(0)9-5637078-5

タイ工場

WHA Chonburi Industrial Estate 2 390/18 Moo 2, Khao
Khasong, Sri Racha, Chonburi 20110 Thailand
TEL. +66-(0)3-3136104-6

LAVITEC Technology Joint Stock Company

Lot 8-CN18, Khai Quang Industrial Park, Khai Quang Ward, Vinh
Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam
TEL. (+84)211-3712-107

各種SNS でも情報配信を行っています。

YouTube



Twitter



Instagram



ホームページ



お客様相談窓口
フリーダイヤル

0120-50-0451

<https://www.hakuzo.co.jp/>

2025.09